

MEDIVATORS®

# CLEANSCOPE®

System for transport og korttidslagring



Beskyttet korttidslagring  
av rene endoskoper

Bidrar til å avverge skade  
på utstyret


Klar identifisering av ren  
og kontaminert

Reduserer mulighet for  
krysskontaminering

# LETT Å SKILLE RENT UTSTYR FRA KONTAMINERT UTSTYR UNDER TRANSPORT OG LAGRING

CLEANASCOPE®-systemet for transport og lagring beskytter dine endoskoper og annet fintfølende utstyr ved å begrense direkte håndtering og redusere kontakt med luftbårne kontaminanter under transport og korttidslagring. Den patenterte formen skaper et beskyttende miljø for hvert desinfiserte endoskop. Grønne (rene) og røde (kontaminerte) fargekodete poser identifiserer umiddelbart rent eller kontaminert utstyr.

- Tredelt, steril poseprosess for engangsbruk
- Vogner er tilgjengelige for å romme to, fem, seks eller ti brett

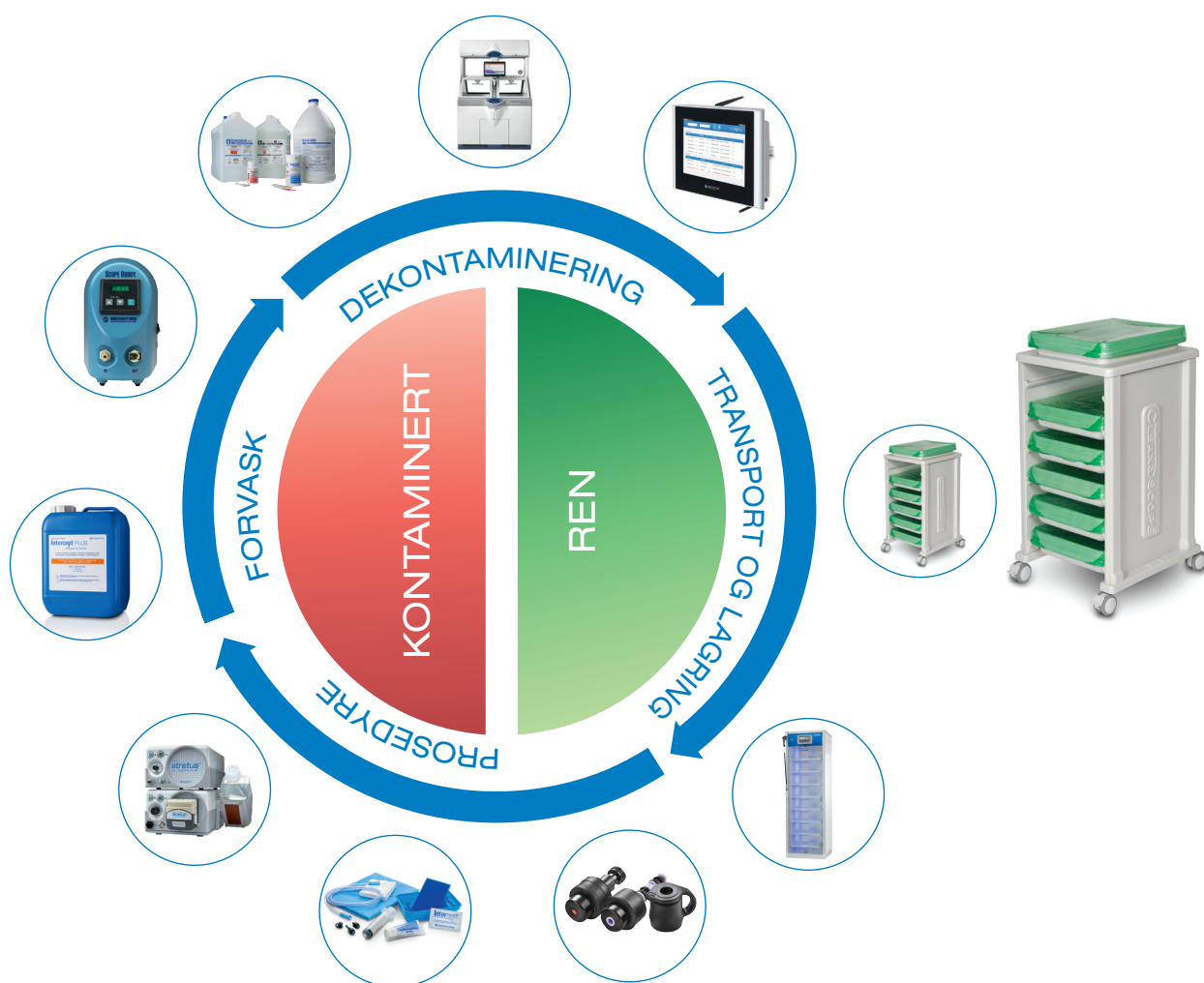

## FRA VASKE- OG DESINFEKSJONSSYSTEM FOR ENDOSKOP OG TILBAKE I 4 ENKLE TRINN:

1

Kle brettet ved hjelp av den sterile bunnposen, og sørg for at de innvendige flatene og kanten er helt dekket




2

Legg det rene endoskopet inn i brettet med den sterile røde posen for senere bruk



3

Dekk toppen av brettet med den sterile grønne posen som er merket med «REN» for lett identifikasjon om at endoskopet er klart til bruk på en pasient

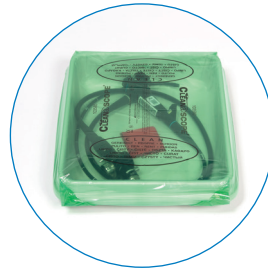

4

Etter prosedyren, skyll og tørk av endoskopet og legg det inn i brettet. Dekk brettet ved hjelp av den røde posen som klart indikerer at utstyret er «KONTAMINERT»



«Posesystemet er en av de viktigste grunnene til at mange innretninger benytter CLEANASCOPE®-systemet – de fargekodete posene eliminerer gjetninger under dekontaminering av endoskoper»

Libby Thomson, tidligere ledende sykepleier i Bowel Cancer Screening Centre og sykepleier innen endoskopi

## FORBEDRER EFFEKTIVITETEN AV DIN DEKONTAMINERINGSSYKLUS FOR ENDOSKOP

Gir beskyttet korttidslagring for rene endoskoper og utstyr



Harde deksler tilgjengelig for økt beskyttelse under transport utenfor avdelingen



Tilgjengelig i alternativer for 2, 5, 6 og 10 brett



Gir KLAR IDENTIFIKASJON om «rent» og «kontaminert» utstyr



Robuste, gjenbrukbare brett bidrar til å avverge skade på utstyret

Brettene passer perfekt inn i vognens brukerdefinerte overdel


Versjoner med 2, 5 og 6 brett gir en ideell arbeidshøyde

Posesystemet som er STERILT pakket reduserer muligheten for krysskontaminering

«Det skitne endoskopet transporteres til dekontamineringsområdet i en lukket beholder som hindrer eksponering av personell, pasienter eller miljøet for potensielle smittefarlige organismer»

ASGE-kvalitetssikring i endoskopikomiteen, 2011 og SGNA standarder for kontroll av infeksjon under dekontaminering av fleksible gastrointestinale endoskoper 2012

## Produktspesifikasjoner for CLEANASCOPE®-vogner samt CLEANASCOPE®-poser og -tilbehør

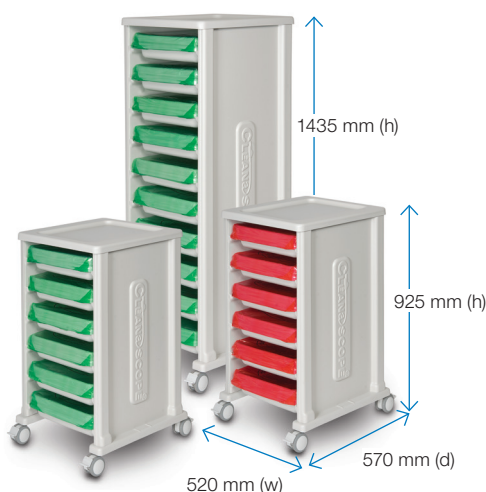

### Bestillingsinformasjon CLEANASCOPE-vogner

Produkt Beskrivelse	Delenumer	Mål	Enheter Pr. boks
Vogn med seks brett	103466	925 mm (h) x 520 mm (w) x 570 mm (d)	1
Vogn med ti brett	103467	1435 mm (h) x 520 mm (w) x 570 mm (d)	1
			1
Vogn med fem brett	103470	800 mm (h) x 520 mm (w) x 570 mm (d)	1

### Bestillingsinformasjon for CLEANASCOPE-poser og -tilbehør

Produkt Beskrivelse	Del Nummer	Enheter pr. boks
CLEANASCOPE sterilt posesett	103585	200 (røde og grønne deksler med bunnpose)
Veggmontert dispenser for poser til engangsbruk	103604	1
CLEANASCOPE-brett	103456	1
CLEANASCOPE-brettdeksel	103457	1



## Det originale og beste systemet for transport eller korttidslagring av endoskoper og annet fintfølende utstyr

Produktbeskrivelse	CLEANASCOPE	Alternative Cover System	Bag System
Steril pose	Alternativ	X	X
Fast deksel	Posesystem	X	X
Gjenbrukbart brettssystem	✓	✓	X
Spesialbygd transportvogn	✓	✓	X
Poser laget etter mål for å sikre at kontaminering holdes ute/inne	✓	X	X
Brett som fullt ut bærer vekten av et dyrt endoskop	✓	✓	X
Lettlest identifikasjon på posen	✓	X	X

CLEANASCOPE® er et varemerke for Medica International Limited  
MEDIVATORS® er et varemerke for Medivators Inc.



Manufactured in the UK by:

Cantel (UK) Limited  
Campfield Road  
Shoeburyness  
Essex  
SS3 9BX  
UK  
Tel: +44 (0) 1702 291878

Cantel Medical (UK) Limited  
Wolsley House  
Staffordshire Technology Park  
Beaonside, Stafford ST18 0GA  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 1785.782420  
Fax: +44 (0) 1785.782421

Medivators BV  
Sourethweg 11  
6422 PC Heerlen  
The Netherlands  
Tel: +31.45.5.471.471  
Fax: +31.45.5.429.595

Medivators Inc.  
14605 28th Avenue North  
Minneapolis, MN  
55447-4822 USA  
Tel: +1.763.553.3300  
Fax: +1.763.553.3387

Cantel Medical Asia/Pacific Pte. Ltd.  
1A International Business Park  
#05-01 Singapore 609933  
Tel: +65.6227.9698  
Fax: +65.6225.6848

Cantel Medical Devices (China) Co. Ltd.  
Unit 804-805, Innov Tower Block A,  
Hongmei Road, Xuhui 200233 Shanghai  
Tel: +86 21 60161380  
Fax: +86 21 61210913